

SELECT PROFCARE



Classified as category 1
Conformity Declaration: this product meets
the Directive 93/42/ECC on medical devices.

Made in China

SELECT SPORT A/S ■ Fabriksparken 46
DK-2600 Glostrup ■ select-sport.com

UK Profcare Pro Strap Tape

Function:

- High tensile strength tape
- Non-elastic with very strong adhesive
- Easy to tear by hand length- and widthwise
- Porous adhesive allows skin to breathe
- Provides strong support for sports injuries


Instruction for use:

Fix the top of the tape. Keep a constant traction for the first circle. Overlap the next circle with half width on the first circle. To assure good stickiness, let the final circle fully cover the previous circle. Avoid skin contact. Keep a constant pressure with the palm for a few seconds on the end of the tape. Time of use should not exceed 3-4 hours.

Material:

60% Fabric, 40% Adhesive
Fabric: 100% Rayon

Contains rosin

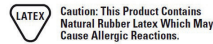

FIN Profcare Pro Strap Tape

Käyttötarkoitus:

- Erittäin hyvin venytystä kestävä teippi
- Joustamaton ja erittäin vahva liima-aine
- Helppo repäistä käsin pituus- ja leveyssuunnassa
- Huokoinen liimapinta on hengittävä iholle
- Tarjoaa vahvan tuen urheiluvammoihin


Käyttöohjeet:

Kiinnitä teipin yläreuna. Pidä teippistä jatkuva veto ensimmäisen kierroksen aikana. Kierrä seuraava kerros siten, että se on puoliiksi ensimmäisen teippikerroksen päällä. Varmista, että pito on hyvä peittämällä edellinen teippikerros kokonaan viimeisellä. Vältä ihokosketusta. Pidä kämmenen avulla paine tasaisena tarttumalla teipin päästä muutaman sekunnin ajaksi. Käyttöaika ei saa ylittää 3-4 tuntia.

Materiaali:

60% Kangas, 40% Liima-Aine
Kangas: 100% Raionia

Sisältää viuluhartsia

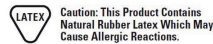

IT Profcare Pro Strap Tape

Indicazioni:

- Nastro ad alta resistenza alla rottura
- Non elastico, con adesivo ultra aderente
- Strappo manuale facile, sia in direzione orizzontale che verticale
- L'adesivo poroso consente alla pelle di respirare
- Offre un ottimo sostegno per il recupero dagli infortuni sportivi


Istruzioni per l'uso:

Fixe a extremidade superior da fita. Mantenha uma tração constante na primeira volta. Dê a volta seguinte com metade da largura por cima da primeira volta. Para garantir uma boa aderência, a última volta deve cobrir totalmente a volta anterior. Evite o contacto com a pele. Exerça uma pressão constante na extremidade inferior com a palma da mão durante alguns segundos. Não deve ser utilizado acima de 3-4 horas de cada vez.

Materiale:

60% Tessuto, 40% Adesivo
Tessuto: 100% Rayon

Contiene colofonia

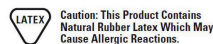

DK Profcare Pro Strap Tape

Funktion:

- Tape med høj trækstyrke
- Uelastisk med meget stærkt klæbemiddel
- Let at rive over med hånden både i længde og bredde
- Porøst klæbemiddel lader huden ånde
- Giver stærk støtte ved sportsskader


Brugsanvisning:

Fastgør toppen af tapen. Hold konstant trækraft i første cirkel. Overlap næste cirkel med halv bredde på første cirkel. Lad sidste cirkel dække forrige cirkel helt for at sikre god klæbrighed. Undgå kontakt med huden. Hold et konstant tryk med håndfladen i et par sekunder på tapens afslutning. Bør ikke bruges mere end 3-4 timer ad gangen.

Materiale:

60% Stof, 40% Klæbemiddel
Stof: 100% Rayon

Indeholder kolofonium

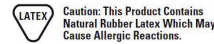

DE Profcare Pro Strap Tape

Funktion:

- Sehr reißfestes Klebeband
- Nicht elastisch und mit sehr starkem Haftklebstoff
- Mit der Hand längs und quer mühelos abreißbar
- Der poröse Klebstoff lässt die Haut atmen
- Bietet starke Unterstützung bei Sportverletzungen


Gebrauchsanweisung:

Fixieren Sie die Oberseite des Klebebandes. Halten Sie das Klebeband für den ersten Kreis konstant auf Zug. Lassen Sie den nächsten Kreis mit der halben Breite auf dem ersten Kreis überlappen. Um eine gute Haftung sicherzustellen, sollte der letzte Kreis vollständig über dem vorhergehenden Kreis liegen. Vermeiden Sie Hautkontakt. Drücken Sie einige Sekunden lang mit konstantem Druck mit der Handfläche auf das Ende des Klebebandes. Die Anwendungszeit sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.

Material:

60% Gewebe, 40% Haftend
Gewebe: 100% Rayon

Enthält Kolophonium

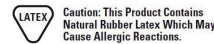

PT Profcare Pro Strap Tape

Indicazioni:

- Fita com elevada resistência à rutura
- Não elástica, com adesivo extra forte
- Fácil de cortar à mão em comprimento e largura
- O adesivo poroso permite a respirabilidade da pele
- Garante um apoio excelente em lesões desportivas


Modo de usar:

Fixe a extremidade superior da fita. Mantenha uma tração constante na primeira volta. Dê a volta seguinte com metade da largura por cima da primeira volta. Para garantir uma boa aderência, a última volta deve cobrir totalmente a volta anterior. Evite o contacto com a pele. Exerça uma pressão constante na extremidade inferior com a palma da mão durante alguns segundos. Não deve ser utilizado acima de 3-4 horas de cada vez.

Materiale:

60% Tecido, 40% Adesivo
Tecido: 100% Rayon

Contém colofónia

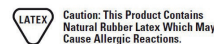

SE Profcare Pro Strap Tape

Funktion:

- Tejp med hög dragstyrka
- Oelastisk med mycket starkt klister
- Enkel att riva av med handen på både längd och bredd
- Poröst klister låter huden andas
- Ger kraftigt stöd vid idrottsskador


Instruktion för användning:

Sätt fast toppen av teipen. Håll teipen spänd under hela första varvet. Under nästa varv ska teipen överlappa hälften av första cirkeln i bredd. Sista varvet ska teipen täcka föregående varv helt för att säkra god kläbighet. Undvik kontakt med huden. Håll konstant tryck med handflatan på teipens avslutning. Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar.

Material:

60% Tyg, 40% Klister
Tyg: 100% Rayon

Innehåller kolofonium

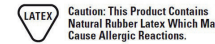

FR Profcare Pro Strap Tape

Fonction:

- Bande avec une résistance à la traction élevée
- Non extensible, avec un adhésif très puissant
- Se déchire facilement à la main, dans la longueur et la largeur
- Adhésif poreux permettant à la peau de respirer
- Procure une contention forte en cas de blessure sportive


Mode d'emploi:

Fixez le haut de la bande. Appliquez une traction constante au premier tour. Assurez un chevauchement d'une demi-largeur au deuxième tour. Pour favoriser l'adhérence, le dernier tour doit complètement couvrir le tour précédent. Évitez le contact avec la peau. Appliquez une pression constante au bout de la bande avec la paume, pendant quelques secondes. Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser les 3 à 4 heures.

Matériau:

60% Tissu, 40% Adhésif
Tissu: 100% Rayonne

Contient du colophane

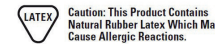

PL Profcare Pro Strap Tape

Funkcja:

- Mocna taśma bardzo odporna na rozciąganie
- Nieelastyczna z bardzo mocnym klejem
- Łatwa do odrywania ręką — wzdłuż i w poprzek
- Porowata warstwa kleju pozwala skórze oddychać
- Gwarantuje mocną stabilizację, chroniąc przed kontuzjami sportowymi


Instrukcja użytkownika:

Przyklej górną część taśmy. Utrzymuj stałą przyczepność podczas pierwszego owinięcia. Owiń kolejną warstwę taśmy tak, aby była przesunięta o połowę długości względem pierwszej warstwy. Aby uzyskać dobrą przyczepność, ostatnia warstwa powinna całkowicie zakrywać pierwszą. Unikaj kontaktu ze skórą. Utrzymuj stały nacisk dłonią przez kilka sekund na końcu taśmy. Czas użycia nie powinien przekraczać 3-4 godzin.

Materiale:

60% Tkanina, 40% Przylepna
Tkanina: 100% Sztuczny Jedwab

Zawiera kalafonię

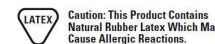

NO Profcare Pro Strap Tape

Funksjon:

- Teip med høy trekkstyrke
- Uelastisk med meget sterkt klebemiddel
- Lett å rive av med handen både på langs og på tvers
- Porøst klebemiddel som lar huden puste
- Gir sterk støtte ved sportsskader


Brukerveiledning:

Fest enden av teipen. Bruk en konstant trekkraft den første runden. Overlap neste runde med halve bredden på første runde. La den siste runden dekke den forrige helt, for å sikre god klebeevne. Unngå kontakt med huden. Hold et konstant trykk med håndflaten i et par sekunder ved slutten av teipen. Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer.

Material:

60% Stoff, 40% Klebemiddel
Stoff: 100% Rayon

Inneholder kolofonium

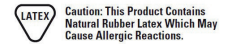

ES Profcare Pro Strap Tape

Función:

- Cinta de alta resistencia a la tensión
- No elástica con adhesivo de gran fuerza adherente
- Fácil de retirar con la mano a lo largo y ancho
- Adhesivo poroso que permite respirar a la piel
- Proporciona un fuerte apoyo a lesiones deportivas


Instrucciones de uso:

Fixar un extremo de la cinta. Mantener una adherencia constante durante el primer círculo. Superponer la siguiente vuelta sobre la primera con la mitad de la anchura. Para asegurar una buena adherencia, aplicar la última vuelta de modo que cubra completamente la vuelta anterior. Evitar el contacto con la piel. Mantener una presión constante con la palma de la mano durante unos segundos en el extremo de la cinta. El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas.

Material:

60% Tejido, 40% Adhesivo
Tejido: 100% Rayón

Contiene colofonia

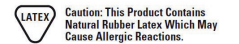

RU Profcare Pro Strap Tape

Назначение:

- Лента с высоким пределом прочности на разрыв
- Незластичная с очень сильным клейким веществом
- Легко отрывать руками по длине и ширине
- Пористое клейкое вещество позволяет коже дышать
- Обеспечивает сильную поддержку при спортивных травмах

Инструкция по применению:

Закфиксируйте верхнюю часть ленты. Поддерживайте постоянное натяжение при первом обороте. Переключите следующим оборотом на половну ширины первый оборот. Для гарантии хорошей клейкости последний оборот должен полностью закрыть предыдущий оборот. Избегайте контакта с кожей. Непрерывно давите ладонью в течение нескольких секунд на конец ленты. Время использования не должно превышать 3-4 часа.

Материал:

60% ткань, 40% клейкое вещество
Ткань: 100% вискоза

Содержит канифоль

